



Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε την συσκευή αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς και για τον σκοπό για τον οποίο προβλέπεται.
- Φυλάξτε την συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Για λόγους υγιεινής, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή είτε αποκλειστικά για πρωκτική ή στοματική μέτρηση.
- Μην βουτάτε την συσκευή στο νερό, μην το μασήσετε και μην το λυγίζετε.
- Αποφύγετε να έρθει σε επαφή με την οθόνη σάλιο.
- Μην αφήσετε τη συσκευή να πέσει κάτω και αποφύγετε τις βαριές συγκρούσεις.

Σύμβολα ασφαλείας στην πινακίδα τύπου




Διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και διατηρήστε τις σε ένα ασφαλές μέρος!



Τμήμα εφαρμογής του τύπου BF

Περιγραφή της συσκευής

1. Οθόνη
2. Διακόπτης On/Off
3. Αισθητήρας
4. Θήκη μπαταρίας

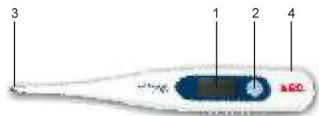

Εισαγωγή της μπαταρίας

- Η μπαταρία που παρέχεται είναι μπαταρία μακράς βιωσιμότητας τύπου (ΑΙΘΙΟΥ).
- Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας (4) από το πλάι του θερμόμετρου και τραβήξτε έντονα.
 - Αντικαταστήστε την μπαταρία με μία ιδίου τύπου. Προσέξτε την πόλωση.
 - Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.

Ένα σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη (1) εμφανίζεται, όταν η μπαταρία θα πρέπει να αλλάξει.

Προσοχή: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε να δίνεται τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους τόπους συλλογής ή στον έμπορο που πουλάει μπαταρίες. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στην φωτιά.

Οδηγίες για την μέτρηση

- Πιέστε το κουμπί On/Off (2). Μετά από έναν σύντομο διάστημα, η οθόνη θα παρουσιάσει τους °C.
- Παρακαλώ σταθείτε, καθίστε ή ξαπλώστε ακίνητοι.
- Έναρξη μέτρησης. Για να μετρήσετε στοματικά, βάλτε το θερμόμετρο (3) στο στόμα σας και κλείστε το. Η κανονική θερμοκρασία είναι 37.0 °C.
- Εάν θέλετε να πάρετε τη θερμοκρασία από τη μασχάλη, καθαρίστε το θερμόμετρο με ένα στεγνό ύφασμα πρώτα και βάλτε το κάτω από το βραχιονά σας. Η κανονική θερμοκρασία είναι 36.5 °C.
- Εάν χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο από τον πρωκτό, βάλτε λίγη υδροδιαλυτή κρέμα, π.χ. βαζελίνη, στην άκρη της συσκευής. Βάλτε το προσεκτικά το ανώτατο 1 cm. Η κανονική θερμοκρασία είναι 37.5 °C.
- Όταν η διαδικασία μέτρησης ολοκληρώνεται (μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα) η συσκευή θα ηχήσει.
- Εάν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή 'Hi °C θα επιδειχθεί, εάν είναι πάρα πολύ χαμηλή θα δείτε 'Lo °C στην οθόνη.
- Μετά από 6 λεπτά ή πιέζοντας το κουμπί On/Off, η συσκευή σβήνει αυτόματα.
- Εάν ανοίξετε πάλι τη συσκευή, θα παρουσιάσει πάντα πρώτα την τελευταία μετρημένη θερμοκρασία (λειτουργία μνήμης).

Περιποίηση και συντήρηση

- Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίζετε την συσκευή μετά από κάθε χρήση (συνιστάται).
- Μην χρησιμοποιείτε αέρια ή άλλα ισχυρά απορρυπαντικά.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί. (Οι μπαταρίες με διαρροή μπορούν να χαλάσουν τη συσκευή.)
- Καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση την συσκευή και κρατήστε την στη θήκη της.
- Προστατεύστε το θερμομέτρο από άμεση ακτινοβολία του ήλιου, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και από σκόνη.
- Μην εκθέτετε την συσκευή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από -20 °C) ή πολύ υψηλές (άνω των 60 °C).

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.

Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!

Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.

Εφαρμοσμένοι κανόνες

Το σήμα CE- **CE 0197** της συσκευής μέτρησης είναι αντίστοιχο της κατευθυντήριας γραμμής της Ε.Ε. 93/42/EEC (Οδηγίες ιατρικών συσκευών). Οι εξής κανονισμοί ισχύουν για την κατασκευή και την παραγωγή της συσκευής.

EN 60601-1-2:1993: Ιατρικά ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές.

Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"



Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.